



DIOXIUM

A D V A N C E D

DET SENASTE INOM ESTETISK LASERBEHANDLING!
BEHANDLINGAR FÖR BÅDE HONOM OCH HENNE



Dioxium Advanced är det enda och första systemet på marknaden som kombinerar de två gyllene våglängderna 10600 nm och 1540 nm i en och samma behandling!

Med Dioxium Advanced kan vi både arbeta på djupa och ytliga lager av huden samt ablativt, icke ablativt eller med en kombination av dessa, helt beroende på vilken behandling din hud behöver. Dessutom om man använder båda våglängderna tillsammans så förstärker dessa två våglängder effekten av din behandling och förbättrar därmed resultaten avsevärt. Med dioxium kan vi behandla alla kroppsdelar och hudtyper.

VAD ÄR, OCH HUR FUNGERAR, EN FRAKTIONERAD LASER?

Historiskt är fraktionerad laser är en vidareutveckling från laserslipningen som var populärt på 90-talet då man med hjälp av en laserstråle skalade bort översta hudlagret (epidermis) på patienten. Huden blev vaxaktig och även mycket tunn och skör. Detta medförde stora infektionsrisker, lång läkningsprocess upp till 6 veckor på sjukhus och huden fick läka med läkares dagliga uppsikt under ett bandage.

Den första fraktionerade lasern lanserades 2003 och var en koldioxidlaser. Denna typ av laser har använts sedan dess och används alljämt för behandling av hud och

hudförbättringar bl.a. i Dioxium.

Med fraktionerad laserbehandling påverkar lasern huden i mikroskopiska behandlingspunkter med en exakt precision och ett jämt fördelat mönster. Runt dessa behandlade punkter är huden helt frisk och opåverkad. Detta triggar igång kroppens naturliga läkningsprocess och medför en nybildning av kollagenfibrer som ersätter den gamla huden och ger en föryngrad, jämnare och fräschare hud med en fin lyster.

10600 NM - ABLATIV LASER

Koldioxidlaser är den vanligaste lasertypen av fraktionerad laser som används vid hudföryngning. Med denna teknik gör man mikroskopiska hål ner till läderhuden, resultatet blir en mycket kortare läkningsprocess än en laserslipning men fortfarande med vissa infektionsrisker då det bildas sårskorpor från de små hålbildningarna. Behandlingen är en ablativ process vilket innebär att den förångar hudceller och behandlingens nackdel är att man riskerar pigmentförändringar på de behandlade områdena. Metoden används för att reducera djupa rynkor, minska stora porer, ta bort ärr och för att få en slätare hud med jämnare hudton.


1540 NM - ICKE ABLATIV LASER

Bygger på samma princip som koldioxidlaser, men med denna våglängd penetreras det aldrig

LASERSLIPNING

ABLATIV FRAKTIONERAD

ICKE ABLATIV FRAKTIONERAD

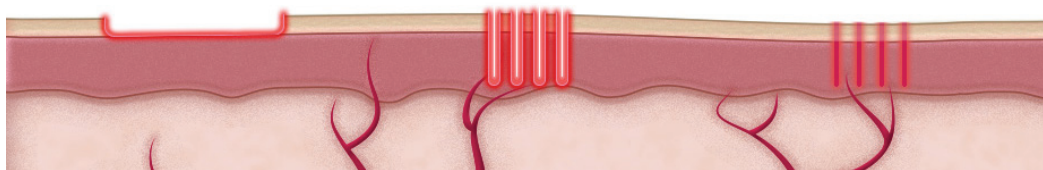

några hål i huden som det gör med laserslipning eller koldioxidlaser. Laserstrålen är mycket skonsammare mot huden då den är en icke ablativ process, icke ablativ laser lämnar översta hudlagret helt intakt och skapar koagulation i djupare strukturer i huden, därav kortare återhämtningstid och minskad risk för komplikationer. Behandlingsmetoden är väldigt gynnsam för att reducera rynkor, ta bort ärr, acneärr, förminska stora porer, yttliga kärl, solskadad hud, ojämn hudton, hudbristningar.

Med dioxium kan man alltså kombinera båda dessa våglängder för att optimera resultatet utefter hur lång återhämtningstid man vill ha.

MED DIOXIUM KAN DU BEHANDLA

- Rynkor
- Hud med dålig elasticitet
- Ärr
- Akneärr
- Solskadad hud
- Stora porer
- Ojämn hudton
- Bristningar

DET UNIKA MED DIOXIUM

- Kombinerar ablativ och icke ablativ laser för att optimera resultatet baserat på syftet med behandlingen
- Anpassningsbar återhämtningstid

FÖRBEREDELSE INFÖR BEHANDLINGEN

Vid den första konsultationen träffar kunden certifierad behandlare för Dioxium Advanced, då man också gör en behandlingsplan. Den totala behandlingstiden varierar kraftigt beroende på hur stort område som behandlas.

HUR MÅNGA BEHANDLINGAR KRÄVS?

Det rekommenderas att man genomför 3-5 behandlingar, lite beroende på förutsättningar och önskemål, med 3-5 veckors mellanrum. Resultatet märks redan efter några dagar. Resultatet är permanent, däremot stoppas ej hudens naturliga åldringsprocess.

VAD HÄNDER EFTER BEHANDLINGEN?

Eftersom behandlingsvariationen med Dioxium är väldigt stor så är också reaktionen efter en behandling varierande, det är därför extra viktigt att vara uppmärksam på din terapeuts råd och konsultation för just din behandling.

Beroende på vilken typ av behandling man gjort kan man uppleva allt från att huden bara känns varm och att den stramar, ungefär som när man blivit lätt solbränd, till att man har en återhämtningstid på en vecka.

Tänk på att tillföra huden extra mycket fukt så länge du fortfarande är påverkad av behandlingen. Det är inte ovanligt att det kan kliä i huden och det är då viktigt att inte kliä, det är en del av hudens läkningsprocess.

Tänk även på att undvika solexponering av det behandlade området eftersom UV-ljuset kan leda till nedbrytning av kollagen och elastin i huden samt pigmentförändringar.

Vi rekommenderar också att man undviker smink, alkohol och hårdare fysiska aktiviteter under de första dygnet efter behandling.

Boka din behandling hos:



Leverantör och skandinavisk agent för Dioxiium Advanced är Victus Clinic. Vill Du läsa mer om Dioxiium Advanced eller om det senaste inom estetik apparatur, så besöker du oss på www.victusclinic.se